

Administración de medicación

- Limpia siempre la alargadera antes y después de la medicación.
- Los comprimidos deben triturarse, disolverse en agua y administrarse con una jeringa.
- No mezcles distintas medicaciones.

Higiene bucal

- Es importante el cepillado diario.
- El/la niño/a debe estar inclinado/a hacia delante durante la limpieza.
- Valora además si es necesaria la aspiración por la boca.

Posibles complicaciones

- Si ocurre una salida accidental del botón durante los primeros 4 meses después de la IQ, riesgo alto. Acude a Urgencias inmediatamente.
- Si ocurre una salida accidental 4 meses después de la intervención quirúrgica, intenta colocar el botón de recambio o acude a Urgencias.
- Si se obstruye el botón irriga la alargadera con agua tibia y avisa a enfermería.

❗ **Ante cualquier complicación o signo de alerta, avisa al equipo de Paliativos Pediátricos o acude a Urgencias.**

#MésEmpatia

campus.santpau.cat



Cuidados del botón gástrico en el domicilio



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona




SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

¿Qué es un botón gástrico?

Es una sonda de silicona transparente que se coloca a través de la piel del abdomen hasta el estómago. Sirve para alimentar a la criatura y darle medicación. Es un dispositivo diseñado para mayor confort y movilidad.

El equipo de enfermería cambiará el botón gástrico cada seis meses.

Existen diferentes tamaños que se adaptarán al paciente según vaya creciendo.

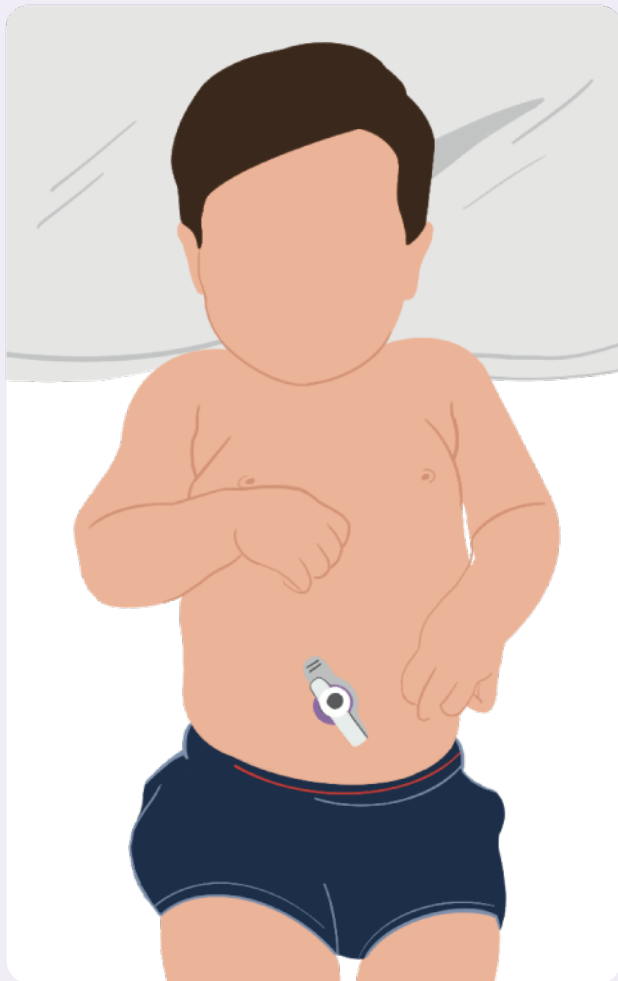

Medidas de higiene y cuidados

CUIDADOS DEL ESTOMA



Limpia la zona de alrededor del botón con agua tibia y jabón.



Seca muy bien y con cuidado la zona de alrededor. Evita dejar zonas húmedas



Si ves que está enrojecido o inflamado, contacta con enfermería.

CUIDADOS DEL BOTÓN



Gira el botón una vez al día. Y comprueba que está bien cerrado si no lo usas.



Enfermería verificará el contenido del globo mensualmente.



No sumerjas el botón gástrico hasta 10 días post-IQ.



No realices presión abdominal durante tres semanas.

CUIDADOS DE LAS ALARGADERAS



Antes y después de cada comida, pasa agua para evitar los restos de alimento en las alargaderas.



Limpia externamente con agua y jabón.

ADMINISTRACIÓN DEL ALIMENTO



- Se recomienda que el/la niño/a esté sentado durante la alimentación.
- Conecta la alargadera al botón haciendo coincidir la raya negra de ésta con la del botón y gira una vuelta la alargadera.
- La administración no debe ser rápida y el alimento siempre ha de estar a temperatura ambiente. Si lo guardas en la nevera, debes sacarlo una hora antes.
- Limpia la alargadera una vez finalizada la alimentación.